

キューマットの外皮は東レ(株)製の人工皮革を使用しています。

東レ独自のポリエステルマイクロファイバーで構成されたナチュラルな表面感と軽さを兼ね備えたスエード調人工皮革です。

### ●【もぐさ】一口メモ



漢方に代表される東洋医学は、いわば自然流の医学として見直されています。なかでも『お灸』はその代表選手です。

この『お灸』の効力を簡単に、いつでも、誰にでもお使いできるようにと考案されたのが家庭用温灸器「キューマット」です。「キューマット」の温灸効果がわずらわしい痛み、筋肉のしこりを和らげます。胃腸の動きを活発にします。『ヨモギ』の持っている良い香りにはアロマ<香り>効果があり優れた健康法となっております。

### ● キューマットの構造

キューマットは、熱い、跡が残るなどのお灸のマイナス要素を取り去った現代の温灸器です。

キューマットに内蔵された面状の発熱体が、生育光線を伴った赤外線を発生しカートリッジに充填された『もぐさ』をくんじょうします。穏やかな湿熱が体内に深く浸透し体の内部から細胞の活性化を促進させます。

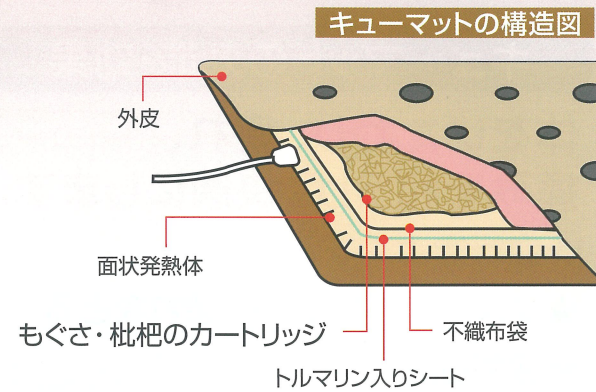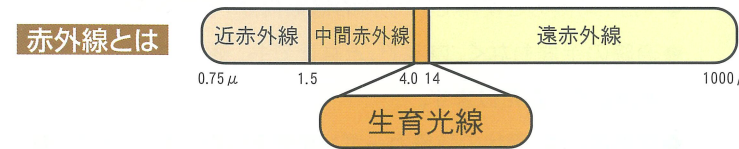

### 仕様

医療用具承認番号	20100BZZ00834000
類別	管理医療機器(Ⅱ種)
一般的名称	温灸器
JMDNコード	71018000
販売名	キューマット
外皮の組成	人工皮革(東レ)
電源コード	電源側コード2m
定格	AC100V・100W
寸法	約38×83cm(大)、約29×40cm(小)
荷姿	縦41.8cm×横54cm、高さ9.5cm
本体重量	約2.0kg

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

●『もぐさ』の交換は1日1時間ご使用の場合、2年半が交換の目安になります。

●『もぐさ』のお取り替えは取扱販売店へお申し出ください。

■TK-5800	本体価格	203,500円(税込)
■交換用もぐさカートリッジ EM-300		22,000円(税込)



医療機器承認番号 20100BZZ00834000



### 安全に関するご注意

- ご使用前に添付書類の『取扱説明書』を良くお読みの上、正しくお使いください。
- 当商品は暖房器具ではありません。高温でなくても充分に効果は得られます。
- 直接肌に触れるような使用をされると低温やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 長時間同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 業務用等で使用しないで下さい。
- 身体の不自由な方は、付き添いなしでご使用にならないでください。
- 特に高熱の方、乳幼児、妊婦の方、お子様、皮膚の弱い方、安静を必要とする人はご使用しないでください。
- 次の方は医師とご相談の上でご使用ください。  
\*低温やけどをしたことのある人 \*糖尿病等の抹消循環障害による知覚障害のある人 \*温度感覚喪失が認められる人 \*適用部位に異常がある人 \*心臓障害のある人 \*安静を必要とする人 \*熱の高い人(38℃以上)  
例えば急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動等の強い時期、衰弱しているとき) \*脊椎の骨折、捻挫、肉離れ等の急性疼痛性疾患の人 \*悪性腫瘍のある人 \*妊娠中又は出産直後の人 \*その他疾患のある人

### 補修用性能部品の最低保有期間

キューマットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

美しさと健康を大切にしたいですね。

## 家庭用温灸器

# キューマット<sup>®</sup>

## TK-5800

心臓部のカートリッジに  
もぐさ・薬草(枇杷の葉)を採用しました

医療機器承認番号  
20100BZZ00834000  
類別  
管理医療機器(Ⅱ種)  
JMDNコード  
71018000(温灸器)  
意匠登録済

#### 【販売企画】

### キューマット 株式会社

〒101-0035  
東京都千代田区神田紺屋町16 NASビル4F  
電話 03-5297-1117  
フリーダイヤル 0120-291-910

#### 【製造販売元】

### 株式会社 三幸ポライト

〒311-4303  
茨城県東茨城郡城里町石塚1184-3  
電話 029-288-2311




# TK-5800

体をいたわり、疲れ、痛みを和らげ、快適にします。

医療機器承認番号 20100BZZ00834000



## キューマットの効果的な使い方

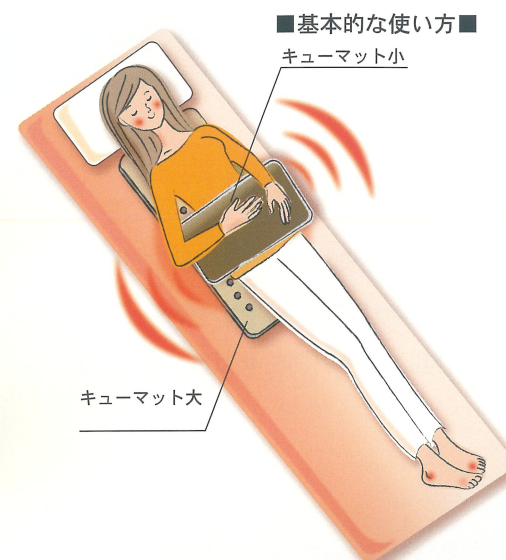

- ◆キューマットは、マット(大)とマット(小)の2種類で一組となります。
- ◆写真のように、マット(大)が背筋に沿ってまっすぐに当たるようにご使用ください。
- ◆マット(小)を腹部に当て、2枚を同時にご使用いただくと、より効果的です。
- ◆マット(小)は、肩、腕、脚などの痛む患部にご使用になると便利です。
- ◆使用時間は、一回30分から1時間程度が適当です。
- ◆毎日繰り返しのご使用をお勧めします。うっとうしい痛みには、粘り強い治療が大切です。
- ◆体質によって効果の表れ方には個人差がありますが、継続してご使用いただくことで、より高い効果が得られます。
- ◆もぐさは、毎日1時間の使用で、2年半が交換の目安です。交換用のもぐさは、お買い求めいただいたお店にお申し付けください。

## キューマットの効能・効果

体をいたわり、疲れ、痛みを和らげ、快適にします。

- ★血行をよくする
- ★筋肉のこりをほぐす、疲れをとる
- ★疲労回復
- ★胃腸の働きを活発にする
- ★神経痛、筋肉痛の痛みを緩解

## 使いやすく経済的で便利

- ◆キューマットは、使いやすさ、経済性の高さ、安全性にも配慮してあります。
- ◆コントローラーにより、温度、時間の調節が簡単です。
- ◆1日1時間のご使用で、1ヶ月の電気代は75円程度。
- ◆通院の手間もなく、自宅で、どなたでも、気持ちよく、気楽に治療していただけます。
- ◆発熱体には、面状の特殊カーボンを使用しています。局所的な圧力に強く、絶縁性にも優れ、安全にお使い頂けます。

## 【キューマット】の当て方

※必ず衣服を着用した状態でご利用ください

## —キューマットのカートリッジ内部—

もぐさ + 枇杷

のコラボレーション

+トルマリン



### ◆よもぎ「Artemisia (アルテミシア)」

『よもぎ』の葉の裏には白い綿毛があり、これがお灸の原料「もぐさ」になります。「お灸」は中国に発祥し、平安朝の頃日本に伝来されました。以後「お灸」は日本で進化し「自然治癒力」を高める療法として、子供から大人まで愛用されてきました。




### ◆枇杷「Eriobotrya (エリオボトリア)」

『枇杷』の葉の優れた効果は古代インドの経典に「大薬王樹」「無憂扇」と記され、古くから万能薬として利用されていました。日本へは仏教と共に伝わり、民間療法として「枇杷葉温灸」や「枇杷湯」などで古くから広く親しまれています。成分分析により鎮痛作用や消炎効果があることが解っています。

## コントローラー名称

通電時間設定ボタン

通電時間ランプ  
設定により点灯します

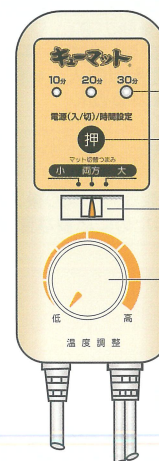

温度調整つまみ

マット切替つまみ

